
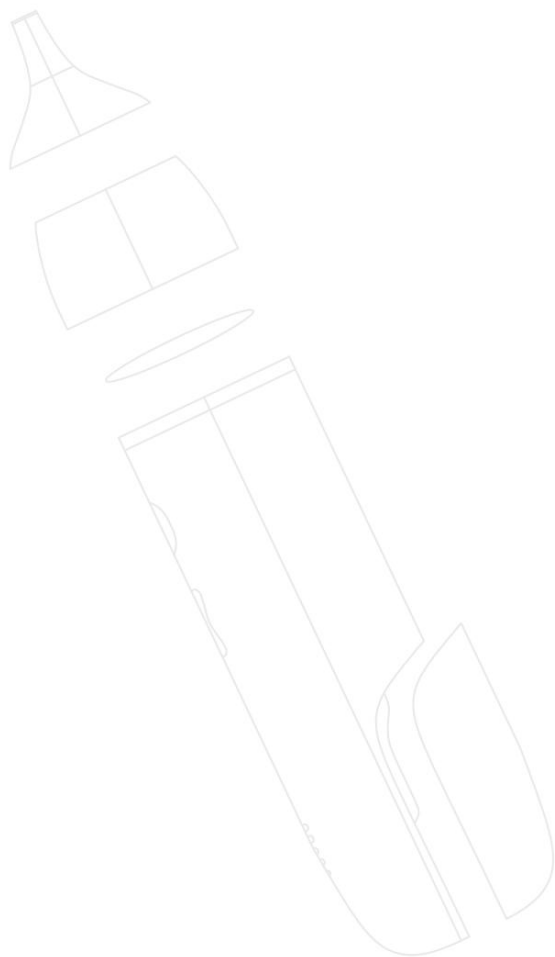



ASPIRADOR NASAL PARA BEBÉ

BABY NASAL ASPIRATOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA ARMADO Y USO
INSTRUCTION MANUAL FOR ASSEMBLY AND USE

belluno[®]
baby 

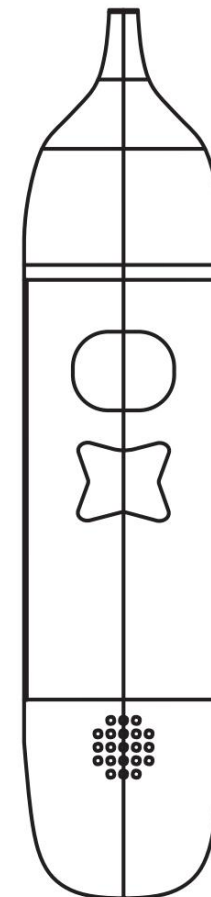

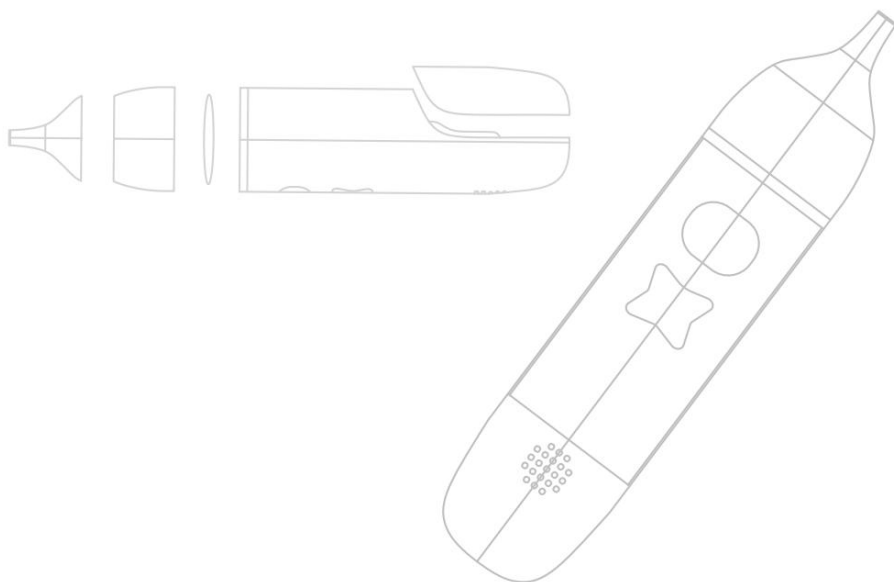

Lea este manual en su totalidad antes de ensamblar el producto y siga todas las instrucciones aquí contenidas. Por la seguridad de su hijo, por favor lea estas instrucciones y guárdelas para futura referencia. Si el contenido de este manual no se ajusta al producto, prevalecerá el producto actual. Las ilustraciones son solo representativas. El diseño y el estilo pueden variar. La empresa se reserva los derechos de cambio de diseño.

Please read this manual in its entirety before assembling the product and follow all instructions contained herein. Please retain this instruction manual for future reference. If the content of this manual does not conform to the actual product, the actual product will prevail. Illustrations are representative only. Design and style may vary. The company reserves design change rights.

ÍNDICE

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad	02
Características	03
Consejos de conservación del producto	04
Instrucciones del producto	05
Armado y limpieza del producto	06
Reemplazo de baterías	07

INDEX

ENGLISH

Safety instructions	09
Features	10
Product conservation tips	11
Product instructions	13
Product assembly and cleaning	14
Battery replacement	15

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto sólo debe ser utilizado para limpiar la nariz y los derivados de la cavidad nasal del bebé.

- Evitar que los objetos sólidos y duros de más de 3mm entren en la boquilla de succión.
- Utilice los accesorios suministrados por el fabricante.
- Este producto no es un juguete. Por favor, guarde este producto en un lugar seguro y no deje que el niño lo opere.
- Por favor, utilice pilas alcalinas AA, o baterías recargables, no usar baterías de níquel-metal hidruro (NiMH).
- Cuando no se utilice durante más de dos semanas, retire las baterías.
- Por favor, siga las instrucciones para instalar las baterías.

Este producto es adecuado para su uso en el hogar, para ayudar a succionar el fluido nasal o los derivados de la cavidad nasal del bebé.

- Por favor, no olvide limpiar la boquilla de succión y el contenedor antes de su uso. Se recomienda ponerlo en remojo en agua hirviendo a 100 °C durante varios minutos. No utilice artefactos de alta temperatura como el horno de microondas.
- No sumerja el producto en su totalidad en líquido.
- Por favor, compruebe que el sello no esté dañado.
- Por favor, lávese las manos antes de utilizar el aspirador nasal.
- El modo de funcionamiento de este producto es continuo. Para prolongar la vida de la batería, se recomienda usarlo por 10 minutos y luego apagarlo 5 minutos.


CARACTERÍSTICAS

- Succión de tres velocidades.
- Hermosa música que hace feliz al bebé.
- Accesorios reutilizables, fáciles de usar, seguros e higiénicos.

CONSEJOS DE CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

- Limpie el producto con un agente de limpieza como alcohol o el detergente.
- Puede esterilizar la boquilla de succión con agua hirviendo o vapor, pero no puede ser esterilizada en un horno microondas.
- Después de la desinfección, limpie el producto con un paño suave y seco.
- Mantener el producto a resguardo de la luz directa del sol y lugares húmedos.
- Evite el uso de productos químicos corrosivos para limpiar el producto.

Cuando el producto no se utilice durante dos días, por favor, retire las baterías para evitar daños.

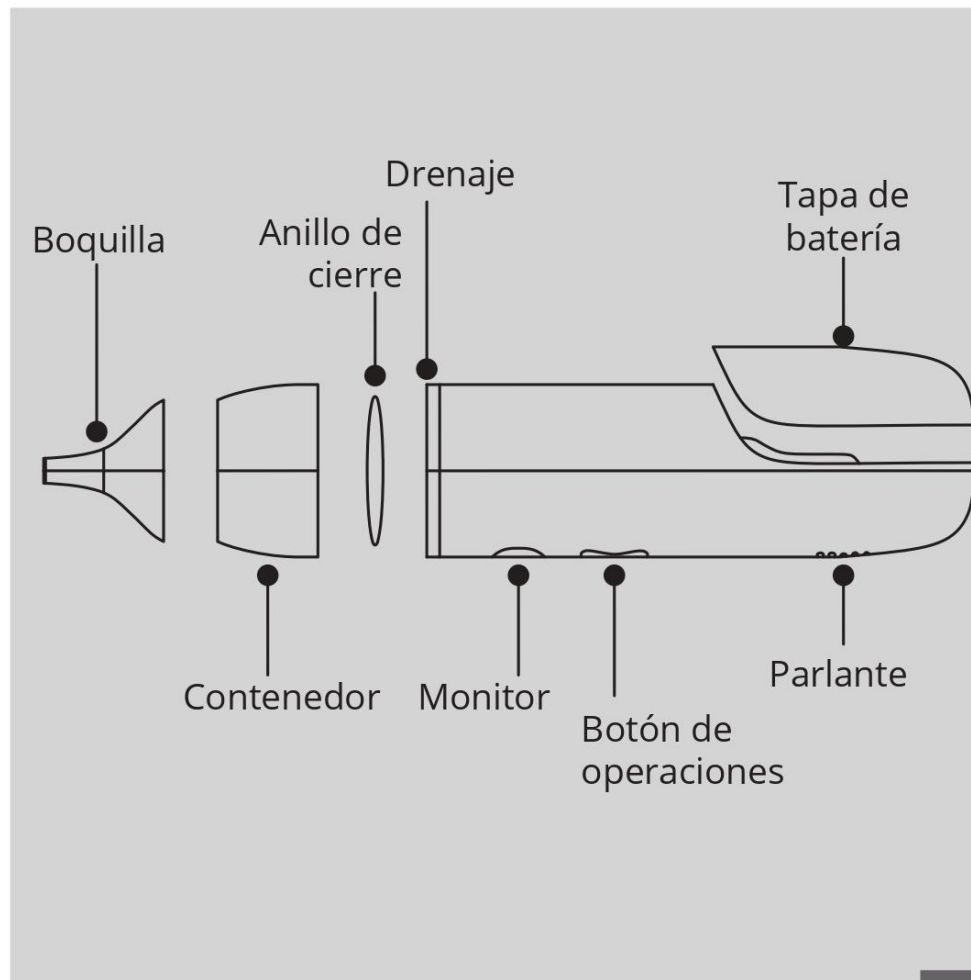

INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO

- Inserte las baterías según las indicaciones de polaridad indicadas en el compartimiento correspondiente.
- Presione el botón "  " para activar el aspirador nasal para bebés.
- Presione el botón "  " para ajustar una de las 3 posiciones posibles.
- Coloque cuidadosamente la boquilla de succión en el borde exterior de la nariz y presione " **S** " para limpiar la cavidad nasal.
- Después de su uso, primero quite la boquilla de succión del borde exterior de la cavidad nasal, y luego presione el botón "  " para apagar el dispositivo.
- Antes de usarlo. Puede elegir encender la música, presione el botón "  " para encender la música, y luego presione para apagarla.


ARMADO Y LA LIMPIEZA DEL PRODUCTO

ARMADO

1. Quitar la tapa y colocar dos baterías alcalinas.
2. Colocar la boquilla de succión.


LIMPIEZA

1. El aspirador nasal sólo puede ser limpiado con una toalla húmeda.
2. Si el aspirador se encuentra sucio o no fue utilizado por una semana, puede ser limpiado con agua hirviendo a 100 °C.

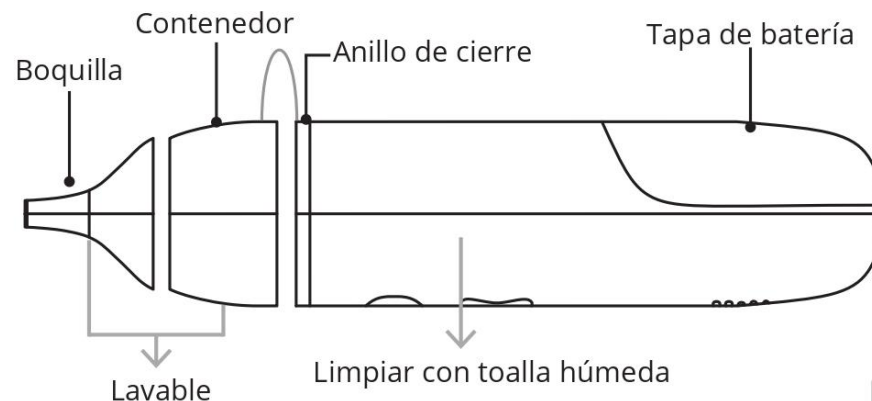

REEMPLAZO DE BATERÍAS

1. Quite la tapa de las baterías del aspirador nasal para bebés.
2. Cargue dos pilas alcalinas AA, asegurándose que la polaridad es la correcta.
3. Coloque la tapa de las baterías del aspirador nasal para bebés.

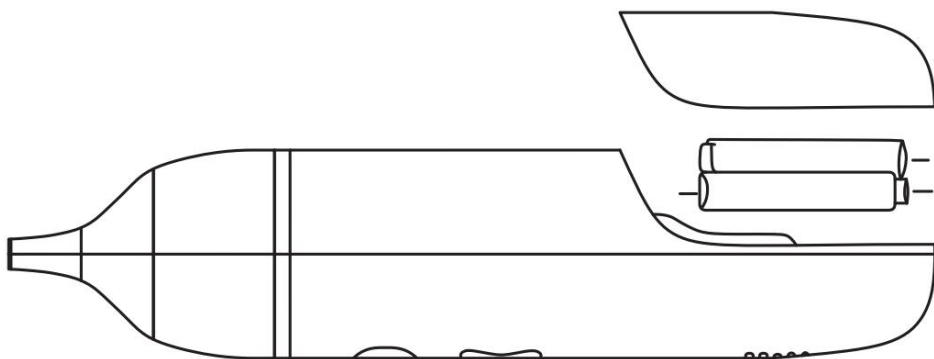

SAFETY INSTRUCTIONS

This product should only be used to clean the nose and derivatives from the baby's nasal cavity.

- Avoid that solid and hard objects of more than 3mm enter the suction nozzle.
- Use the accessories supplied by the manufacturer.
- This product is not a toy. Please store this product in a safe place and do not let the child operate it.
- Please use AA alkaline batteries, or rechargeable batteries, do not use nickel-metal-hydride (NiMH) batteries.
- When not in use for more than two weeks, remove the batteries.
- Please follow the instructions for installing the batteries.

This product is suitable for home use, to help suction the baby's nasal fluid or derivatives from the nasal cavity.

- Please remember to clean the suction nozzle and container before use. It is recommended to soak it in boiling water at 100°C for several minutes. Do not use high temperature devices such as microwave ovens.
- Do not immerse the product completely in liquid.
- Please check that the seal is not damaged.
- Please wash your hands before using the nasal aspirator.
- The operation mode of this product is continuous. To prolong battery life, it is recommended to use it for 10 minutes and then turn it off for 5 minutes.


FEATURES

- Three speed suction.
- Beautiful music that makes the baby happy.
- Reusable, easy to use, safe and hygienic accessories.

PRODUCT CONSERVATION TIPS

- Clean the product with a cleaning agent such as alcohol or detergent.
- You can sterilize the suction nozzle with boiling water or steam, but it cannot be sterilized in a microwave oven.
- After disinfection, wipe the product with a soft, dry cloth.
- Keep the product away from direct sunlight and damp places.
- Avoid using corrosive chemicals to clean the product.

When the product is not used for two days, please remove the batteries to avoid damage.

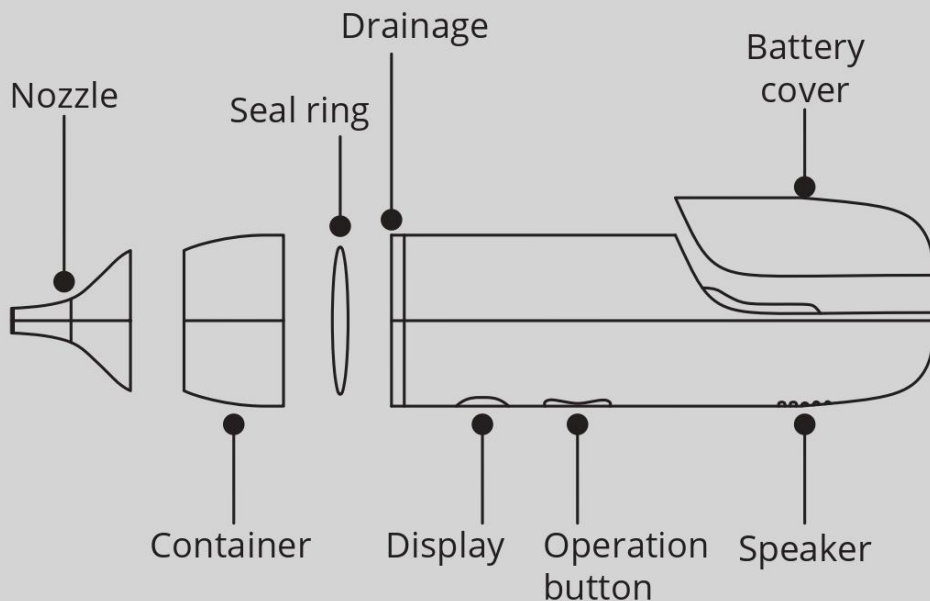

PRODUCT INSTRUCTIONS

- Insert the batteries according to the polarity indications in the battery compartment.
- Press the button "⏻" to activate the baby nasal aspirator.
- Press the button "💡" to adjust one of the three possible positions.
- Carefully place the suction nozzle on the outside edge of the nose and press "S" to clean the nasal cavity.
- After use, first remove the suction nozzle from the outer edge of the nasal cavity, and then press the button "⏻" to turn the device off.
- Before use. You can choose to turn on the music, press "🎵" button to turn on the music, and then press to turn off the music.


PRODUCT ASSEMBLY AND CLEANING

ASSEMBLY

1. Remove the cover and put in two alkaline batteries.
2. Attach the suction nozzle.

CLEANING

1. The nasal aspirator can only be cleaned with a damp towel.
2. If the aspirator is dirty or has not been used for a week, it can be cleaned with boiling water at 100 °C.

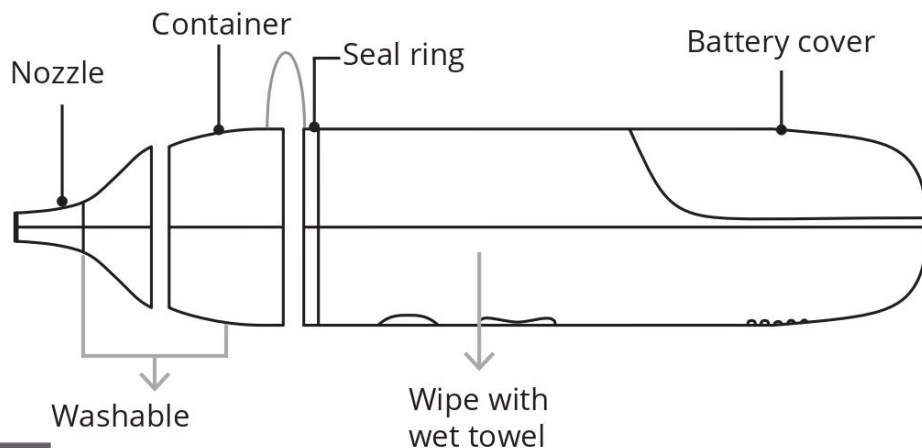

BATTERY REPLACEMENT

1. Remove the battery cover from the baby nasal aspirator.
2. Charge two AA alkaline batteries, making sure the polarity is correct.
3. Replace the battery cover on the baby nasal aspirator.

